

## Funktionen des Produktes

### 1. Induktives Laden

Die kabellose Ladezeit beträgt 1 - 2 Stunden. Während des Aufladens blinkt das rote Kontrolllicht und bei der Aufladung leuchtet das rote Kontrolllicht.

### 2. Drei Stufen Modus

Mit einem Knopfdruck sind drei Modi umschaltbar: Standardreinigung, kraftvolle Reinigung und Zahnmassage.

### 3. 45 Sekunden Timer


Die multidirektionale 360° Reinigung dauert nur 45 Sekunden. Einfach und schnell.

### 4. Automatische Memory Funktion

Das Produkt hat eine eigene Memory-Funktion, die sich nach der Reinigung automatisch das verwendete Modus merken kann. Bei der nächsten Verwendung schaltet sich das Produkt automatisch in den zuletzt benutzten Modus um.

### 5. Desinfektion mit UV-Licht

Die Zahnbürste ist mit UV-Licht desinfiziert. Nach dem Gebrauch stellen Sie die Zahnbürste wieder in die Ladestation und dort wird die Zahnbürste gereinigt.

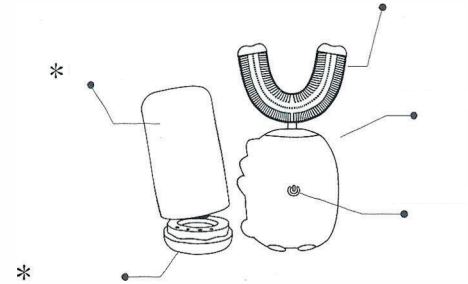

ergonomisches Design

Die Bürste in Form kann sich gut an den Mund anpassen und kann automatisch die Zähne putzen.

Der Reinigungskopf und die Zahnpasta sind umweltfreundlich.



Zubehör  
Mit einem Tiegel für Mundwasser ausgestattet, ökologisches Material und niedliches Design.




Niedliches Design  
Die Kinder werden das Zähneputzen, dank dem schönen Aussehen der Zahnbürste, lieben.

## ☞ Produkteigenschaften



Nehmen Sie die Bürste und den Reinigungskopf und stellen Sie es zusammen.

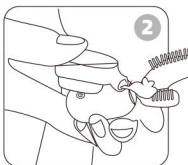


Drücken Sie die Zahnpasta gleichmäßig in die Borstenrillen des U Förmigen Reinigungskopfes.




Drücken Sie den Knopf und wählen Sie das Modus aus.



Stecken Sie den Reinigungskopf in Mund, beißen Sie mit den Zähnen in die Rinne und nicken Sie nach links und rechts.

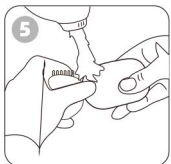

Wischen Sie die Zahnpasta ab und schütten Sie leicht die Wassertropfen aus dem Reinigungskopf ab.

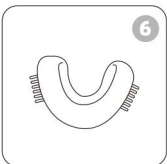

Wir empfehlen den Reinigungskopf jede 3 Monate zu wechseln.

## ☞ Arbeitsmodus

**Die arbeitsmodi sind folgende:**

**Leichter Modus** (drücken Sie den ersten Druckschalter): 14000/min niederfrequenz Vibrationen, das Blaue Licht leuchtet, ungefähr 45 Sekunden zum Ende.

**Reinigungsmodus:** (drücken Sie den zweiten Druckschalter): 30 000/ min hochfrequenz Vibrationen, das rote Licht leuchtet, ungefähr 45 Sekunden zum Ende.

**Frequenzumwandlungsmodus** (drücken Sie den dritten Druckschalter): 14000-30000/minute umwandlungsfrequenz Vibrationen. Blaues Licht leuchtet und es bleibt 45 Sekunden zum Ende.

**Schaltmodus:** ein Druck zum Einschalten und ein Druck zum Umschalten der Gänge 1-2-3 beim Starten.

- A. Ladevorgang: Das lila Licht an der Ladestation leuchtet.
- B. Volle Aufladung: Das lila Licht leuchtet immer.
- C. PLadeerinnerung: (Akku hat weniger als 10%) Das lila Licht anfängt zu blinken.

## ☞ Sicherheitsvorkehrungen

1. Die normale Arbeitstemperatur des Produktes ist 0°C-50°C.
2. Laden Sie das Produkt bei der Zimmertemperatur auf.
3. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird oder Sie brauchen es für längere Zeit lagern, ist empfohlen das Produkt jede 3 Monate auf- und auszuladen.

4. Lagern Sie das Produkt nach Möglichkeiten an einem trockenem, kühlem Ort und vermeiden Sie Sonnenlicht.

5. Wischen Sie nach dem Zähneputzen Wasser und Flecken auf der Bürste mit einem feuchten Tuch ab und versuchen Sie, ein Einweichen in Wasser zu vermeiden.

6. Wenn das Produkt läuft, ist die Ausgangsleistung relativ hoch und es ist verboten, über einen längeren Zeitraum ununterbrochen zu arbeiten, der kontinuierliche Gebrauch darf nicht 10 Minuten überschreiten.

7. Während des Ladevorgangs halten Sie die Bürste trocken. Die Stromversorgung ist kleiner oder gleich 5V1A Ladestromversorgung.

8. Das Produkt hat keine therapeutische Wirkung. Bei Munderkrankungen wird empfohlen, den Gebrauch dieser Bürste mit einem Spezialisten zu konsultieren.

9. Die Kinder dürfen die Zahnbürste nur unter Anleitung von Erwachsenen benutzen.

10. Es ist verboten, das Produkt ins Wasser zu ziehen, die mehr als 50 Grad hat um das Produkt zu reinigen oder dämpfen.

## ☞ Produktparameter

**Nennspannung:**

Gleichstrom 3,7V

**Eingangsleistung:** 2W

**Eingangsparameter:** 5V 0,5A

**Ladezeit:** weniger als 120 min

**Liste der Anhänge**

Zahnbürste \*1

Reinigungskopf \*1

UV desinfektionstiegel \*1

Ladekabel\*1

Benutzermanual \*1

