


Vorderseite

# Ultraschall Zahnreinigungsgerät mit Kamera

Benutzermanual  
T12 Plus  
DE

## 1. Produktbeschreibung

**Lesen Sie dieses Manual vor dem Gebrauch sorgfältig durch**  
Dieses Produkt ist eine neue Art von Ultraschall-Zahnreiner mit Kamera. Das Produkt ermöglicht Verbindung mit Handy, Tablet und anderen Geräten, damit Sie den Zustand Ihrer Zähne über eine App herausfinden können. Es verwendet Ultraschall-Hochfrequenz Resonanztechnologie, um Verfärbungen auf den Zähnen zu entfernen und die Wirkung von Aufhellung und Zahnschutz zu erzielen.

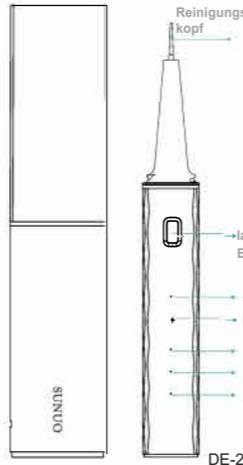

### Funktionen der einzelnen Tasten

- Power – Taste:** Zum Ein-/Ausschalten lange drücken. Ein kurzes Drücken ändert den Modus: Leicht/Mittel/Stark
- LED:** Eingeschaltet: Grünes Licht blinkt. WLAN-Verbindung: Grünes Licht leuchtet
- LED:** Schwaches Akku: Das rote Licht blinkt. Beim Aufladen: Das rote Licht leuchtet. Aufgeladen: Das Licht ist aus
- langes Drücken für Ein-/Ausschalten**
- WLAN Kontrolllicht**
- Kontrolllicht für das Aufladen**
- Leichter Modus**
- Mittlerer Modus**
- Starker Modus**

DE-2

## 2. Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Fehlfunktionen, Stromschlägen, Verletzungen, Feuer und Sachschäden zu verringern.

- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku. Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es nicht der Sonne aus, da sonst der Akku explodieren könnte.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn der Ladeanschluss ordnungsmäßig abgedeckt ist.
- Modifizieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst.
- Stellen Sie das Ladegerät dieses Produktes nicht in feuchte Umgebung oder Wasser.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf Stellen, wo es Kinder erreichen können.
- Vermeiden Sie Stürze.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht beim Baden oder beim Baden in heißen Quellen.
- Wenn Sie an schwere Parodontitis leiden, in Zahnarztbehandlung sind oder Angst von Mundbeschwerden haben, sollten Sie die Verwendung des Produktes mit Ihrem Arzt konsultieren.
- Verwenden Sie keinen Farbvordünger, Benzol oder andere Chemikalien um diese Produkt zu reinigen.
- Bei dem ersten Gebrauch des Produktes, kann es zu leichten Blutungen kommen, da die Zahnwurzel zum ersten Mal dieser Art von Reinigung ausgesetzt wird, das ist normal. Wenn es aber zu starken Blutungen kommen sollte, hören Sie sofort mit der Verwendung dieses Produktes auf. Konsultieren Sie es mit Ihrem Arzt.

DE-3

## 3. Wie geht es:

### Schritt 1:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy und laden Sie die App herunter.  
(Android 4.4, iOS 9.0 oder höhere Systeme unterstützen diese App)




DE-4

### Schritt 2:

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf die Taste in der oberen rechten Ecke.

Verbinden Sie Ihr Gerät: Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden.

Überprüfen Sie die obigen Schritte, um den Vorgang abzuschließen.  
Gerät hinzufügen

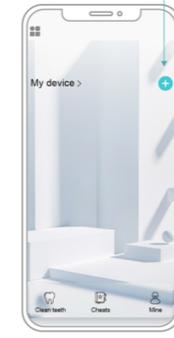

Für die Einschaltungsdrücken Sie für 3 Sekunden

Aktivieren Sie diese Option, um die vorherigen Schritte abzuschließen.

Verbindung starten

DE-5

### Schritt 3:

Mit einem Klick starten Sie die Verbindung und gehen Sie in die Einstellung in Ihrem Handy – WLAN Verbindung.

WLAN Verbindung: SUNUO-T12-XXXX Passwort: 12345678

Klicken Sie auf Sunuo um zurück in die App zu kommen um den Produkt verwenden zu können.



DE-6


## 4. Produktinformationen

### Beachtung:

Dieses Produkt arbeitet nach dem Ultraschallprinzip. Wenn es eingeschaltet ist, erzeugt es keine Vibrationen mit übermäßiger Frequenz, wenn es das Zahnfleisch oder weiche Gegenstände berührt, und hat keine offensichtliche Arbeitsleistung, wenn es Zähne oder harte Gegenstände berührt.

Wählen Sie den gewünschten Modus entsprechend Ihren Anforderungen aus.

- Leichter Modus:** geeignet für Anfänger, entfernt sanft Flecken von Zahnstein.
- Mittlerer Modus:** Entfernt hartnäckigen Zahnstein wie Rauchflecken, Kaffeeflecken, Teelecken usw.
- Starker Modus:** Entfernt den gebildeten Zahnstein und putzt Ihre Zähne.

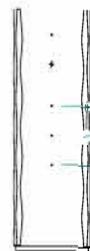


DE-7

## 5. Zubehör




## 6. Austausch der Schutzhülle

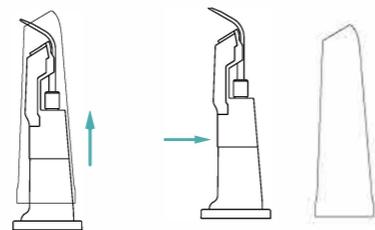

DE-8

## 7. Austausch der Reinigungsköpfe

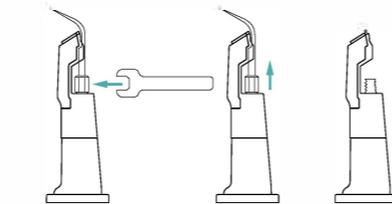

1. Lösen Sie die Matrize mit dem Schraubenschlüssel

2. Nehmen Sie den Reinigungskopf ab

3. Schrauben Sie die Matrize ein

4. Überprüfen Sie die Matrizen an der Unterseite

5. Benutzen Sie den Schraubenschlüssel um den Reinigungskopf zu befestigen

DE-9

## Antworten auf oft gestellte Fragen

- Ist Zahnfleischblutung während des Gebrauchs normal?**  
Antwort: Wenn das Produkt Menschen mit Parodontitis oder Gingivitis verwenden, kann es leicht zu Zahnfleischblutungen kommen, selbst wenn Sie Ihre Zähne putzen oder in harte Nahrungsmittel beißen. Wenn Ihr Zahnfleisch jedoch starker blutet, während Sie das Produkt verwenden, hören Sie mit der Verwendung auf und spülen Sie Ihr Zahnfleisch mit kaltem Wasser ab.
- Ist es normal, dass sich die Spitze des Reinigungsköpfes während des Gebrauchs erwärmt?**  
Antwort: Beim Gebrauch wird elektrische Energie. In kinetische Energie umgewandelt und es ist normal, dass sich die Temperatur des Reinigungsköpfes leicht erhöht.
- Ist es normal, dass das Produkt manchmal Geräusche macht?**  
Antwort: Das Geräusch wird durch die Berührung der Reinigungsköpfes und der Zähne verursacht, also ist es normal.
- Ist es normal, dass das Produkt während des Gebrauchs plötzlich aufhört zu funktionieren?**  
Antwort: Das Produkt ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, die den Betrieb des Senders stoppt, nachdem der Sender 10 Minuten lang in Betrieb war, und der Gang erneut geschaltet werden muss, um den Betriebszustand zu starten.

DE-10

## Fehlerbehebung

- Bei der Einschaltung reagiert das Gerät nicht und die Kamera leuchtet nicht.**  
Vor dem Gebrauch voll aufladen.
- Die App fällt.**  
Löschen Sie die Apps im Hintergrund und starten Sie die App neu.
- Das rote Kontrolllicht blinkt.**  
Es zeigt, dass der Akku schwach ist, verwenden Sie es nach dem Aufladen.
- Das Produkt zeigt nicht das Bild in Realen Zeit nach der Verkopplung mit der App.**  
Trennen Sie die WLAN Verbindung zwischen dem Produkt und Ihrem Handy. Starten Sie das Produkt und Ihr Handy neu. Öffnen Sie erneut die App und verbinden Sie sich erneut mit WLAN.
- WLAN Verbindung ist schwach oder es wird kein Bild angezeigt.**  
Starten Sie das Gerät neu und verbinden Sie es erneut mit der App.

\* Wenn das Problem mit den oben genannten Schritten immer noch nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

DE-11

## Produktparameter

Produkt Name	Produktnummer
Ultraschall Zahnreiner mit Kamera	T12 Plus
Netzwerkstandard	Frequenz
IEEE 802.11b/g/n	2.4GHz
Bildübertragung	Bildsensor
30fps	CMOS
Arbeitstemperatur	Akku
-10 - 50 °C	1200mAh
Akkulebensdauer	Aufladezeit
Ungefähr 90 Minuten	1,5 bis 2 Stunden
Eingabeparameter	Betriebsspannung
5V = 0.5A	5V
Leistung	Kamera
1.8 W	5 MP
Bester Fokus	
0-2cm	

Made in China  
CE RoHS

Rückseite