


TRUESONIC

Inteligentní ultrazvukový domácí čistič zubů Intelligenter Ultraschall-Zahnreiniger für Zuhause Smart Ultrasonic Home Tooth Cleaner

Uživatelská příručka Einführung der Produkte Product introduction

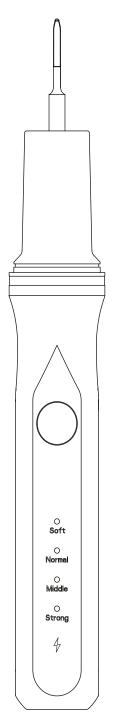

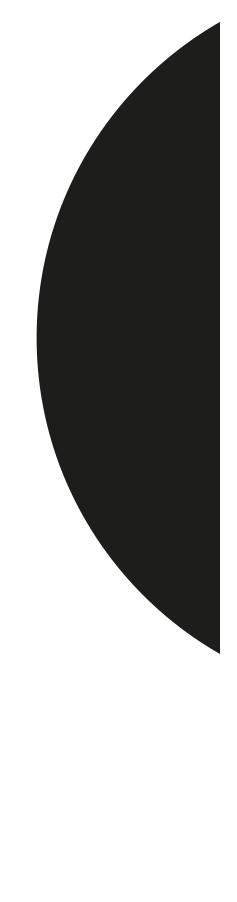

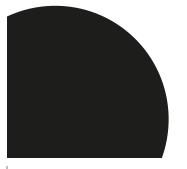

Děkujeme za výběr a důvěru Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und Ihr Vertrauen Thank you for choice and trust

Produkt-Einführung

Gesundheit beginnt mit Ihren Zähnen. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Truesonic Ultraschallreiniger entschieden haben. Sie ist speziell für den Heimgebrauch konzipiert. Truesonic bietet eine stabile Leistung und eine Vielzahl von Funktionen. Sie entfernt effektiv Plaque, Zahnstein und Flecken von den Zähnen und beugt Zahnfleischerkrankungen vor, indem sie harten Zahnstein entfernt. Dieser multifunktionale Plaque-Entferner verwendet fortschrittliche Vibrationen, um Zahnstein und Pigmentierung von Ihren Zähnen löst. Die Bedienung ist höchst intuitiv und effizient.

Sichere Anwendung

- Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.
- Setzen Sie die Spitze bei der Anwendung immer an der Zahnoberfläche an.
 Vermeiden Sie unnötigen Kontakt der Spitze mit weichen Geweben wie Zahnfleisch, Schleimhäuten oder Haut.
- Sie werden die Vibrationen nur dann spüren, wenn die Bürste mit dem Zahn in Berührung kommt. Der Reiniger schaltet sich automatisch ab, wenn er das Zahnfleisch berührt.
- Die Spitze darf während der Reinigung nicht die Keramikprothese, die Füllung oder eine Zahnfüllung berühren. Die Spitze könnte beschädigt werden.
 Verwenden Sie das Gerät nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Methode.
- Der Metallkopf des Zahnreinigers ist austauschbar.
- Halten Sie die Zahnbürste von den Augen fern.
- Im Falle einer Fehlfunktion hören Sie bitte auf, das Gerät zu benutzen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie es nicht von Ihren Kindern benutzen.
- Nicht für Patienten mit Herzschrittmacher geeignet.
- Patienten mit Herzkrankheiten, schwangere Frauen und Kinder sollten Vorsicht walten lassen.
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus, sondern lagern Sie es abgedunkelt bei 0°C bis 40°C in einem Raum.
- Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander.
- · Verwenden Sie das Produkt nicht, während es aufgeladen wird.
- Bei Qualitätsproblemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Geschäfts, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Das Produktprinzip

Dieser Reiniger funktioniert nach dem Prinzip der Umwandlung von elektrischer Energie in Ultraschall-Schwingungsenergie. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten, stellen Sie die Leistung mit den Modi-Tasten ein und beginnen Sie mit der Reinigung der gewünschten Bereiche auf den Zähnen. Die hohe Vibration wird genutzt, um Zahnstein zu zerkleinern sowie, hartnäckige Flecken und losen Zahnstein zu entfernen.


Dinge, die Aufmerksamkeit erfordern

- 1. Wenn Sie an einer Parodontalerkrankung leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.
- 2. Es kann zu Blutungen kommen, auch wenn das Zahnfleisch gesund ist.
- 3. Bei anhaltendem Zahnfleischbluten, das durch Zahnfleischdefekte wie z. B. eine Parodontitis verursacht werden kann, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.
- 4. Lassen Sie die Arbeitsspitze während des Zähneputzens nicht lange auf der Zahnoberfläche liegen.
- 5. Beim Einschalten des Geräts ist kein Geräusch der Spitze zu hören. Sie hören den Ultraschall nur, wenn er mit dem Zahn in Berührung kommt.
- 6. Nicht in Wasser oder Flüssigkeit eintauchen.
- 7. Halten Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch sauber.
- 8. Die Arbeitsspitze muss während des Gebrauchs fest angezogen sein.
- 9. Die Arbeitsspitze darf nicht gebogen oder geschliffen werden.
- 10. Schlagen oder kratzen Sie nicht auf den Griff.
- 11. Trocknen Sie die Maschine nach dem Gebrauch ab und lagern Sie sie in einer kühlen, trockenen Umgebung.
- 12. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, während Sie das Gerät benutzen, damit sich der Griff nicht vom Gerät löst.

Reinigung und Wartung

- 1. Legen Sie das Produkt nicht in andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie es nicht in diese fallen.
- 2. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- 3. Nicht mit giftigen, ätzenden, brennbaren oder explosiven Materialien mischen.
- 4. Spülen Sie Ihren Mund nach jeder Reinigung gründlich aus.
- 5. Waschen Sie den Metallkopf unter sauberem, fließendem Wasser ab.
- 6. Wischen Sie den Körper der Zahnbürste ab.

Beschreibung des Produkts

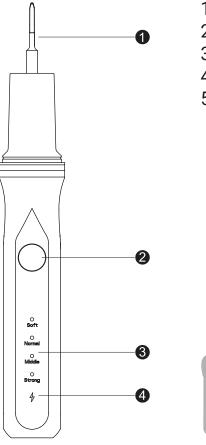


- 1. Zahnreinigungskopf
- 2. Schalter ON/OFF
- 3. 4 Gang-Erlebnismodus
- 4. Elektrische Mengenanzeige
- 5. Montagewerkzeuge




Funktionsweise

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Reiniger vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Es dauert etwa 2 Stunden, bis er vollständig aufgeladen ist.
- 2. Wenn Sie die Zahnbürste zum ersten Mal aufladen oder wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzt haben (mehr als 3 Monate), kann es länger dauern, bis sie vollständig aufgeladen ist.
- 3. Wählen Sie einen geeigneten Aufsatz und setzen Sie ihn im Uhrzeigersinn ein. Verwenden Sie KEINE starke Drehung, um Schäden zu vermeiden.
- 4. Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten und den SOFT-Modus für die normale Reinigung zu aktivieren. Die Startmodus-Kontrollleuchte und die LED-Leuchte am vorderen Ende des Griffs leuchten auf und zeigen an, dass das Gerät in Betrieb ist.
- 5. Setzen Sie das Ende der Spitze so auf den Zahn, dass die Bewegung der Spitze parallel zur Zahnoberfläche verläuft.
- 6. Bei schwer zu entfernendem Zahnstein kann jedoch eine höhere Leistungseinstellung im NORMAL- oder MIDDLE oder STRONG-Modus erforderlich sein.
- 7. Achten Sie darauf, dass die Spitze während der Reinigung in Kontakt mit der Zahnoberfläche bleibt. Bewegen Sie die Spitze langsam hin und her und lassen Sie das Gerät die Arbeit machen. Nutzen Sie kurze und lange Bewegungen, um die gesamte Oberfläche jedes Zahns zu reinigen.
- 8. Bleiben Sie nie länger als 5 Sekunden an einer Stelle, um eine Erwärmung des Behandlungsbereichs zu vermeiden.
- 9. Vorsicht! Das Gerät kann durch Fallenlassen oder unsachgemäße Handhabung an den internen und externen Komponenten beschädigt werden.
- 10. Benutzen Sie das Gerät mit angefeuchtetem Mund.
- 11. Wenn Ihr Mund während des Gebrauchs austrocknet, spülen Sie ihn aus.
- 12. Verwenden Sie bei der Anwendung auf der Innenseite eines Zahns einen Zahnspiegel.
- 13. Unterspannungserkennung. Der Alarm blinkt, wenn die Batteriespannung unter 3 Volt liegt.
- 14. Drücken Sie nach der Anwendung lange auf die OFF-Taste und schalten Sie das Gerät aus. Das Gerät verfügt über eine voreingestellte automatische Abschaltfunktion nach 10 Minuten, um Überhitzung zu verhindern.

Einführung in die Arbeitstipps

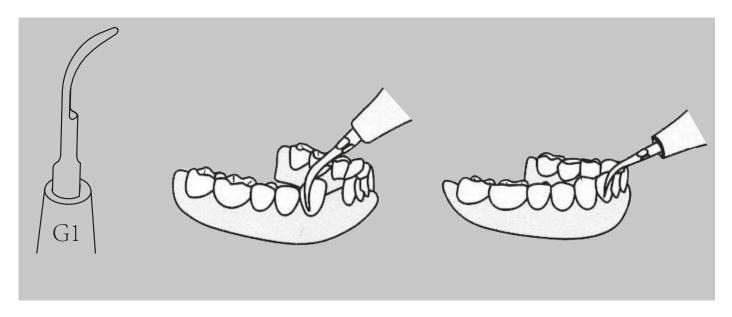

Spitze 1 ist dünn und wird zur Zahnsteinentfernung und Interdentalreinigung verwendet.

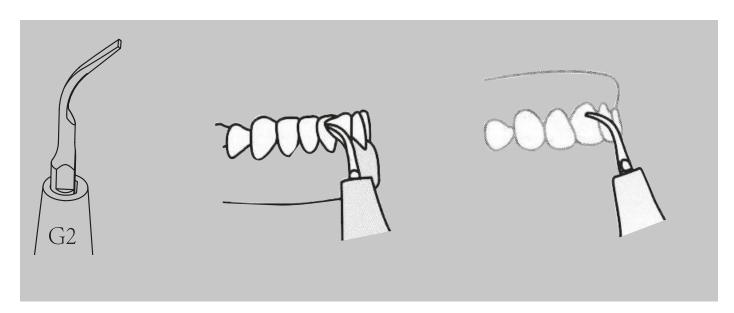


Die Spitze 2 ist breiter und wird zur Entfernung von großem Zahnstein und Pigmentierungen auf den Zähnen verwendet.


- Desinfizieren Sie die Arbeitsspitze vor dem Gebrauch mit heißem Wasser bei hoher Temperatur.
- Um Kreuzinfektionen zu vermeiden, sollten Sie die Arbeitsspitze nicht mit anderen Personen teilen.
- Die Frequenz des Instruments ist unterschiedlich, bitte wählen Sie den richtigen Arbeitsmodus.
- Bitte verwenden Sie die Arbeitsspitze korrekt wie oben beschrieben.

Verwendung der Arbeitsspitzen

Die Arbeitsspitze berührt die Zähne sanft vertikal und bewegt sich nach oben und unten sowie nach links und rechts. Passen Sie die Dauer der Anwendung jedes Teils an den Zustand der Zähne an.

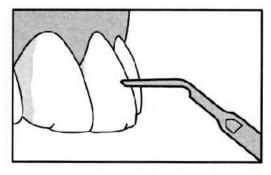





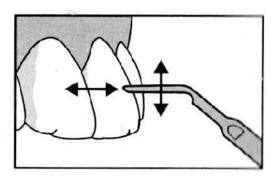


Schmutz auf der Zahnoberfläche

Grenze zwischen Zahnfleisch und Zahn

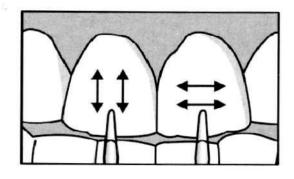


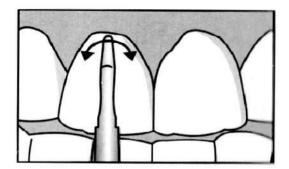


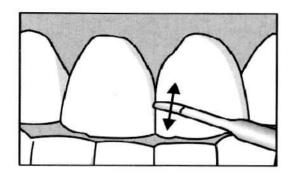

Interdentalraum

Schmutz von unebenen Zähnen

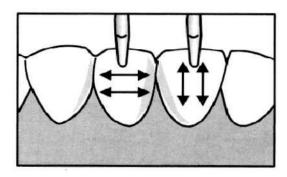

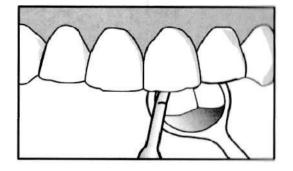


Schmutz auf der Rückseite der Zähne


Bitte verwenden Sie bei der Behandlung der Zahnrückseite ein Dentalglas

Wechseln der Arbeitsspitze




Die Ausrichtung der Arbeitsspitze kann unterschiedlich sein, aber solange sie fest auf ihr montiert ist, kann sie in jeder Richtung verwendet werden.

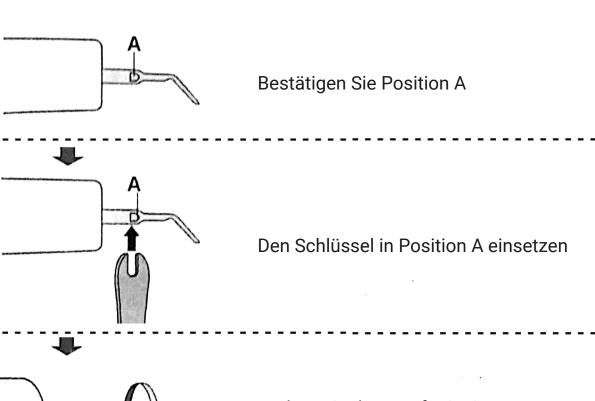

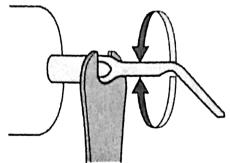

Drehen Sie den Kopf mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Arbeitsspitze zu trennen und die Demontage abzuschließen.

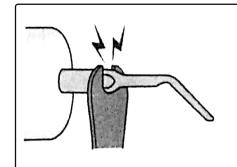

 \triangle


Vorbeugende Maßnahme

Vermeiden Sie eine zu feste Montage, die zu einer Beschädigung der Schnittstelle führen könnte.

Wie zu pflegen



Bitte verwenden Sie keine Verdünnungsmittel, Benzol und Lösungsmittel, Chemikalien oder Scheuerpulver.

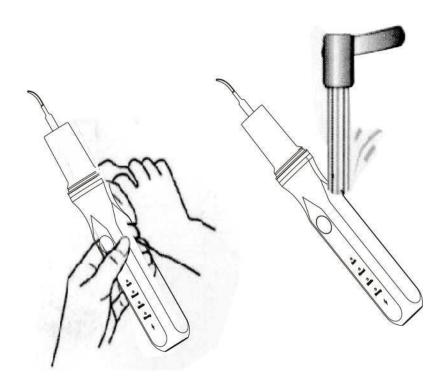

Der Hauptkörper kann direkt mit Wasser gewaschen werden, und der Schmutz auf dem Hauptkörper kann mit einem Lappen abgewischt werden.

Hinweis

- Bitte konsultieren Sie einen zugelassenen Zahnarzt oder Dentalhygieniker, bevor Sie unsere Geräte verwenden. Wir bieten ein Produkt an, keinen Behandlungsplan, und übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Komplikationen. Wenn Sie sich entscheiden, das Produkt ohne professionelle Aufsicht zu verwenden, tun Sie dies auf eigene Gefahr. Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und wir Ihnen einen Ratschlag geben, nehmen Sie diesen nicht als selbstverständlich hin, da wir nicht für den Ratschlag, den wir Ihnen gegeben haben, verantwortlich sind.
- Dieses Produkt ist kein Ersatz für medizinische Geräte und hat keine therapeutische Wirkung.
- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet.