


Floss™-Munddusche

Benutzerhandbuch

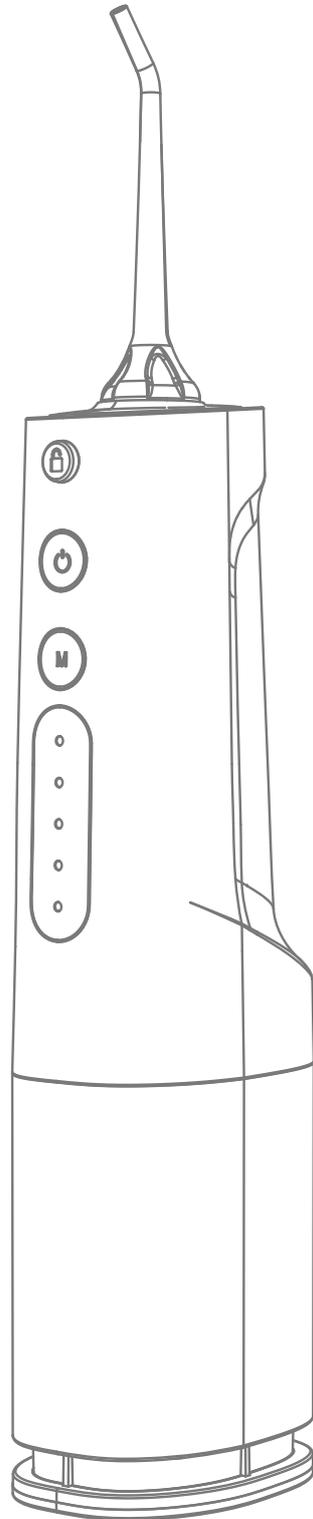

Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und Ihr Vertrauen!

Inhaltsübersicht

Inhalt	01
Besondere Tipps	02
Verwendungshinweise	03
Wichtige Schutzmaßnahmen	04
Warnhinweise	04
Beschreibung des Produkts	05
Produktmerkmale	05
Betriebsanleitung	06
Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen	06
Empfohlene Fähigkeiten	07
Anleitung zur Reinigung	07
Anleitung zur Fehlersuche	08


Besondere Tipps

Überprüfung der Akkukapazität: Wenn die Akkukapazität über 75% liegt, leuchten 4 Kontrollleuchten auf. 75% bis 50% Akkukapazität, 3 Kontrollleuchten leuchten auf. Bei einer Batteriekapazität von 50% bis 25% leuchten 2 Kontrollleuchten. Die DIY-Betriebsleuchte leuchtet hell.

Einstellungen im DIY-Modus

Beim Umschalten in den vierten "DIY"-Modus merkt sich das System, wann der Status zuletzt verwendet wurde. Drücken Sie im vierten Modus erneut die Taste ON/OFF, wird der Arbeitszustand vom niedrigsten Wasserdruck auf den höchsten Wasserdruck erhöht und bleibt vorübergehend im Modus des höchsten Wasserdrucks. Das Wasser zirkuliert entsprechend diesem Modus. Lassen Sie die ON/OFF-Taste los, um die Wahl des Betriebszustands anzuzeigen (der neue Zustand ist gesperrt), das System bleibt im letzten Betriebszustand und arbeitet in diesem.

Zubehör

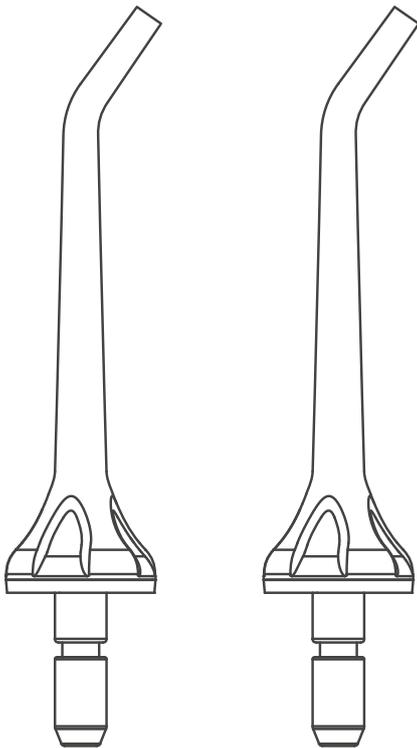

2 Düsen
1 USB-Kabel



Hinweis zur Nutzung

Bei der ersten Benutzung oder bei längerer Nichtbenutzung müssen Sie nach dem Drücken des Schalters eine Weile warten, bis die Munddusche das Wasser freigibt. Gehen Sie unter diesen Umständen wie folgt vor:

- Ziehen Sie den inneren Wassertank bis zum unteren Ende heraus, Sie hören zunächst ein Klicken. Dies bedeutet, dass der Wassertank in die richtige Position gezogen wurde (wenn Sie dies nicht tun, läuft Wasser aus dem Innentank aus).
- Öffnen Sie dann die Abdeckung des Wassereinlasses, um den Wassertank zu füllen.
- Nachdem Sie genügend Wasser in die Düsensitzbuchse gefüllt haben, setzen Sie die Düse wieder ein und schalten Sie die ON/OFF-Taste ein.

Hinweis

1. Stellen Sie bei der ersten Verwendung den "Soft"-Modus ein.
2. Halten Sie die Düsen spitze während der Anwendung dicht an die Zahnlücken heran. Je weiter weg, desto stärker ist der Druck der Düse.


Wichtige Garantiehinweise

1. Zerlegen oder reparieren Sie die internen Komponenten des Produkts nicht.
2. Die Düsenspitze dieses Modells ist austauschbar und universell für die gleichen Produkte unseres Unternehmens.
3. Bitte überprüfen Sie das USB-Kabel vor und nach dem Gebrauch auf Beschädigungen und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
4. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungslöcher.
5. Berühren Sie das Netzteil des Produkts nicht und laden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung auf.
6. Stellen oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es in eine Badewanne, Dusche oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden könnte.
7. Das Produkt sollte nur mit Wasser oder einer anderen nicht ätzenden Flüssigkeit gefüllt werden, die von medizinischem Fachpersonal empfohlen wird.

Warnhinweise

1. Wenn Sie in den letzten 2 Monaten eine Mund- oder Zahnoperation hatten, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und befolgen Sie seine Ratschläge und Anweisungen.
2. Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal zur Reinigung Ihres Mundes verwenden, kann es zu leichtem Zahnfleischbluten kommen, selbst wenn Ihr Zahnfleisch gesund ist. Dies liegt daran, dass Ihr Zahnfleisch zunächst durch den Druck der Düse stimuliert wird und in der Regel nach 1-2 Wochen der Anwendung aufhört zu bluten. Wenn das Zahnfleischbluten länger als 2 Wochen anhält, kann dies auf abnormale Bedingungen wie eine Parodontalerkrankung hinweisen. In diesem Fall sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden und Ihren Zahnarzt aufsuchen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker des Produkts beschädigt ist oder nicht funktioniert, abfällt oder in eine Flüssigkeit gerät.
4. Schließen Sie dieses Produkt nicht an ein anderes als das für das Gerät oder das Ladegerät vorgesehene Spannungssystem an.
5. Dieses Produkt ist nicht dafür geeignet, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung ohne Wissen eines Betreuers benutzt zu werden.
6. Spritzen Sie kein Wasser auf die Unterseite der Zunge, die Ohren, die Nase oder andere empfindliche Körperteile, während das Gerät in Betrieb ist. Der von diesem Produkt ausgeübte Druck kann zu schweren Verletzungen führen.


Beschreibung

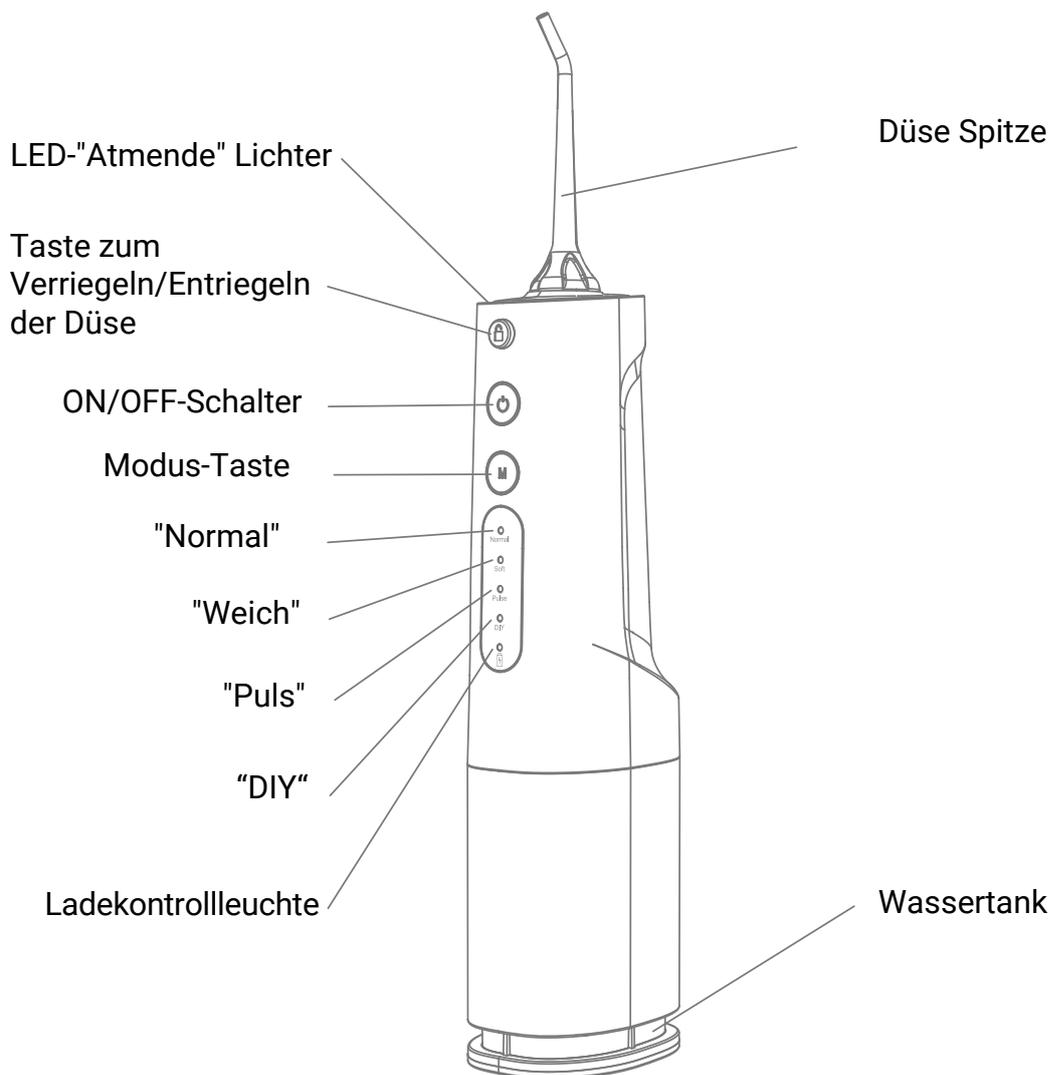

Hinweis: Im Wassertank des Geräts kann etwas Flüssigkeit zurückbleiben. Dabei handelt es sich um destilliertes Wasser, das bei der Inspektion im Werk übrig geblieben ist. Es besteht kein Risiko für Gesundheit und Sicherheit.

Eigenschaften

1. 360ml abnehmbarer, erweiterbarer doppelter Wassertank, kleines Gehäuse, tragbar, leicht zu reinigen.
2. Bunte "atmende" Lichter, weiche Licht-Effekte und dreifarbige Statusanzeige, die es angenehmer zu bedienen machen.
3. Wasserdicht IPX7 entlang der gesamten Länge, so kann es in der Dusche verwendet werden.

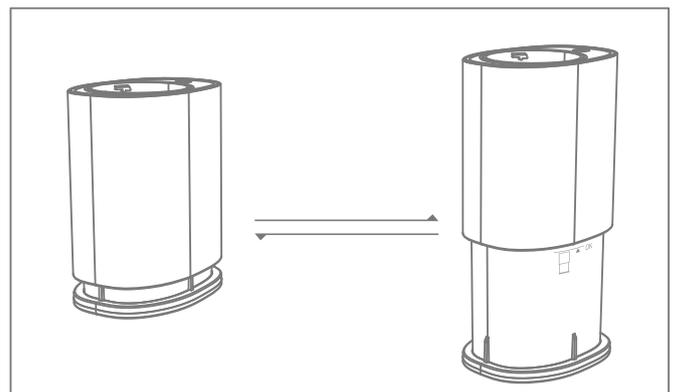

Betriebsanleitung

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Drücken Sie zuerst die ON/OFF-Taste und drücken Sie dann die Modus-Taste, um den Betriebsmodus zu wählen.
2. Öffnen Sie den Wassereinlass des Wassertanks, füllen Sie den Wassertank mit Wasser, schließen Sie das Einlassfenster und drücken Sie fest. Der Wassertank ist abnehmbar und kann zum Befüllen mit Wasser demontiert werden. Während eines solchen Vorgangs kann der Wassertank aus dem Wasserbehälter entfernt werden. (nicht mit der Arbeit beginnen).
3. Die Düse einbauen/auswechseln.
Duschkopf: Um die Düse zu ersetzen oder zu entfernen, drücken Sie die Verriegelung, um die Düsen zu entriegeln.
4. Wählen Sie die Betriebsart: Bei der ersten Benutzung können Sie durch Drücken der Betriebsartentaste auf dem Griff drücken, um den entsprechenden Reinigungsmodus auszuwählen. Sie können den Reinigungsmodus auch nach den Anweisungen Ihres Zahnarztes wählen. (Normaler Modus: Der Standard-Reinigungsmodus, entfernt effektiv Speisereste in den Zahnzwischenräumen und reinigt die Zähne gründlich, hält den Mund frisch. Soft-Modus: Sanfte Massage des Zahnfleisches. Puls-Modus: Puls-Massage des Zahnfleisches, fördert die Blutzirkulation. DIY-Modus: Benutzer können die Reinigungsintensität nach persönlichen Vorlieben anpassen und verschiedene Reinigungsintensitäten innerhalb eines Bereichs nutzen)

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden

1. 8 Stunden vor dem ersten Gebrauch aufladen. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das 5 V 1A-Ladegerät.
2. Entfernen Sie die Silikonabdeckung von der Ladeschale, stecken Sie den USB-Stift in die Ladebuchse der Munddusche (Vergewissern Sie sich, dass keine (Flüssigkeits-) Rückstände in der Buchse sind, bevor Sie sie benutzen).
3. Stecken Sie den USB-Stecker auf der anderen Seite in das Ladegerät und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
4. Während des Ladevorgangs leuchten die Ladeanzeigen rot und blinkt langsam. Wenn das Gerät vollständig geladen ist bleibt die Ladeanzeige grün, bis Sie das Ladegerät entfernen.

Empfehlungen

Anleitung zur Reinigung

- Halten Sie das Gerät aufrecht, so dass die Düsenspitze zu den Zähnen zeigt. Halten Sie die Produkte senkrecht zum Mund, um beste Ergebnisse bei der Anwendung zu erzielen.
- Öffnen Sie den Mund, damit das Wasser herausfließen kann. Sprühen Sie einen Wasserstrahl auf die Zähne und das Zahnfleisch in einem 90 Grad Winkel. Bewegen Sie den Wasseraufsatz langsam an den Zähnen entlang. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit ein.
- Sie können es mit Seifenwasser abwaschen oder in das oberste Fach der Spülmaschine stellen. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Lassen Sie das Wasser im Tank immer ablaufen und trocknen Sie es, bevor Sie das Gerät einer Umgebung mit einer Minustemperatur aussetzen.
- Waschen Sie Schmutz mit einer Bürste oder einem ähnlichen Gegenstand ab und wischen Sie ihn dann mit einem Tuch ab.
- Trocknen Sie den Wassertank, der längere Zeit nicht benutzt wird.

Düse

- Entfernen Sie die Düse, indem Sie die Taste zum Verriegeln/Entriegeln der Düse drücken. Reinigen Sie sie mit Wasser und wischen Sie sie mit einem Tuch ab.
- Es wird empfohlen, die Düsenspitze alle 3 Monate durch eine neue zu ersetzen. Wenn die Düsenspitze zu groß ist, um die Zähne effektiv zu reinigen, wechseln Sie sie.

Anleitung zur Fehlersuche

Gehäuse des Geräts

Wischen Sie den Schmutz mit einem mit mildem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie es anschließend trocken. Bei starker Verschmutzung können Sie es mit Wasser abwaschen.

- Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin, Verdüner usw. zum Abwischen des Geräts.
- Verwenden Sie kein heißes Wasser über 50°C.
- Wischen Sie das Wasser nach der Reinigung ab.
- Biegen Sie das Saugrohr nicht. Andernfalls funktioniert die Ansaugleitung möglicherweise nicht wie erwünscht.
- Reinigen Sie das Filternetz der Ansaugleitung rechtzeitig, um ein Verstopfen des Wasserdeckeltanks zu vermeiden.
- Wischen Sie den Schmutz ab, da sonst Wasser ausläuft.

Probleme Ursache Art der Behandlung

Probleme	Grund	Handhabungsmethode
Rissbildung an der Düse.	Schwere Düsenschäden.	Ersetzen Sie die neue Spitze.
Der Wassertank ist undicht.	Die Dichtung ist beschädigt.	Ersetzen Sie die Dichtung und schicken Sie sie zur Reparatur an den Lieferanten zurück.
	Im Wassertank verbliebenes Wasser oder andere Flüssigkeit.	Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch.
	Wassertankdeckel nicht geschlossen.	Schließen Sie den Deckel des Wassertanks.
Leck zwischen Düse und Düsenhülsen.	Die Düsenspitze ist nicht richtig installiert.	Entfernen Sie die Düse und setzen Sie sie wieder ein.
Leck zwischen Düse und Düsenhülsen Kein Flüssigkeitsstrom oder unzureichender Druck.	Das Gerät ist umgedreht.	Entfernen Sie die Düse und setzen Sie sie wieder ein.
	Mangel an Wasser oder Flüssigkeit im Tank.	Die Düse muss höher sein als der Wassertank.
	Schlechte Betriebsart.	Füllen Sie den Tank mit Flüssigkeit Wählen Sie den Modus "Normal".