


# WATERSONIC

Ultraschall-Zahnreiniger mit  
Wasserkühlung miDent

Benutzerhandbuch  
Einführung in das Produkt

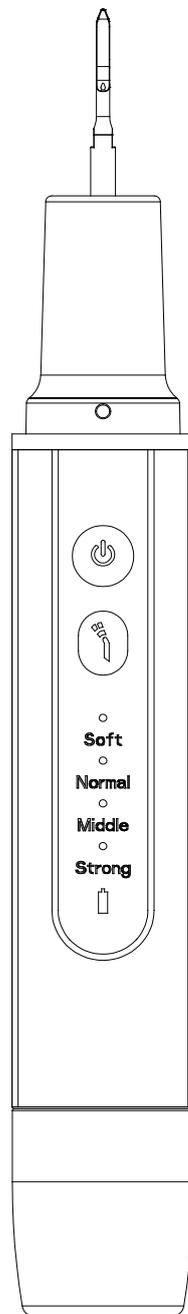

# Produkteinführung und Funktionen

Gesundheit beginnt bei Ihren Zähnen. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere intelligente WATERSONIC Ultraschallzahnbürste mit innovativer Wasserkühlfunktion entschieden haben. Der Ultraschallreiniger ist für die einfache Anwendung zu Hause konzipiert. WATERSONIC entfernt effektiv Plaque, Zahnstein und Flecken von den Zähnen und beugt Zahnfleischerkrankungen vor, indem es harten Zahnstein entfernt. Dieser multifunktionale Plaque-Entferner verwendet fortschrittliche Vibrationen, um Pigmentierungen von den Zähnen zu entfernen. Das Produkt verfügt über 4 einstellbare Modi: sanft, normal, mittel und stark. Das Produkt verfügt über eine Wasserkühlung, um die optimale Temperatur aufrechtzuerhalten und die Zähne während der Anwendung vor Überhitzung zu schützen. Das Gerät verfügt außerdem über einen Überhitzungsschutz mit einer 10-minütigen Abschaltautomatik, die aktiviert wird, wenn das LED-Licht ausgeschaltet wird. Der Hochimpuls-Wasserstrahl reduziert die Arbeitsspitzentemperatur. Der Ultraschallreiniger ist mit einem UV-Sterilisator ausgestattet.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.
- Setzen Sie die Spitze bei der Anwendung immer an der Zahnoberfläche an. Vermeiden Sie unnötigen Kontakt der Spitze mit weichen Geweben wie Zahnfleisch, Schleimhäuten oder Haut.
- Sie werden die Vibrationen nur dann spüren, wenn die Bürste mit dem Zahn in Berührung kommt. Der Reiniger schaltet sich automatisch ab, wenn er das Zahnfleisch berührt.
- Die Spitze darf während der Reinigung nicht die Keramikprothese, die Füllung oder eine Zahnfüllung berühren. Die Spitze könnte beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Methode.
- Der Metallkopf des Zahnreinigers ist austauschbar.
- Halten Sie die Zahnbürste von den Augen fern.
- Im Falle einer Fehlfunktion hören Sie bitte auf, das Gerät zu benutzen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie es nicht von Ihren Kindern benutzen.
- Nicht für Patienten mit Herzschrittmacher geeignet.
- Patienten mit Herzkrankheiten, schwangere Frauen und Kinder sollten Vorsicht walten lassen.
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus, sondern lagern Sie es abgedunkelt bei 0°C bis 40°C in einem Raum.
- Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander.

# Das Funktionsprinzip des Produkts

Dieser Reiniger funktioniert nach dem Prinzip der Umwandlung von elektrischer Energie in Ultraschall-Vibrationsenergie. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten, stellen Sie die Leistung mit den Modustasten ein und beginnen Sie mit der Reinigung der gewünschten Bereiche auf den Zähnen. Die hohe Vibration wird genutzt, um Zahnstein zu zerkleinern, hartnäckige Zahnverfärbungen zu entfernen und Plaque zu beseitigen. Verwenden Sie einen Wasserstrahl, um die Spitze während der Reinigung zu kühlen.

## Zu beachtende Angelegenheiten

1. Wenn Sie an einer Parodontalerkrankung leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.
2. Es kann zu Blutungen kommen, auch wenn das Zahnfleisch gesund ist.
3. Bei anhaltendem Zahnfleischbluten, das durch Zahnfleischdefekte wie z. B. eine Parodontitis verursacht werden kann, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.
4. Lassen Sie die Arbeitsspitze während des Zähneputzens nicht lange auf der Zahnoberfläche liegen.
5. Beim Einschalten des Geräts ist kein Geräusch der Spitze zu hören. Sie hören den Ultraschall nur, wenn er mit dem Zahn in Berührung kommt.
6. Nicht in Wasser oder Flüssigkeit eintauchen.
7. Halten Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch sauber.
8. Die Arbeitsspitze muss während des Gebrauchs fest angezogen sein.
9. Die Arbeitsspitze darf nicht gebogen oder geschliffen werden.
10. Schlagen oder kratzen Sie nicht auf den Griff.
11. Trocknen Sie die Maschine nach dem Gebrauch ab und lagern Sie sie in einer kühlen, trockenen Umgebung.
12. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, während Sie das Gerät benutzen, damit sich der Griff nicht vom Gerät löst.


## Wartung und Reinigung

Nicht mit giftigen, ätzenden, brennbaren oder explosiven Stoffen mischen.  
Nach jedem Putzen den Mund gründlich ausspülen.  
Den Metallkopf unter fließendem Wasser desinfizieren.  
Den Körper der Zahnbürste abwischen.

# Hinweise zur Verwendung

1. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
2. Halten Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch sauber.
3. Ziehen Sie die Arbeitsspitze beim Gebrauch fest an.
4. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, lassen Sie es zunächst 2-3 Sekunden lang laufen und schalten Sie es dann für 1 Sekunde aus.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, um den Arbeitsaufsatz in seinen optimalen Zustand zu bringen.
6. Drücken oder wackeln Sie nicht an der Arbeitsspitze. Schlagen oder kratzen Sie nicht am Griff.
7. Trocknen Sie das Gerät nach Gebrauch ab und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.
8. Füllen Sie den Wasserbehälter nur mit sauberem, ungefährlichem Wasser.


## Beschreibung der Produkte

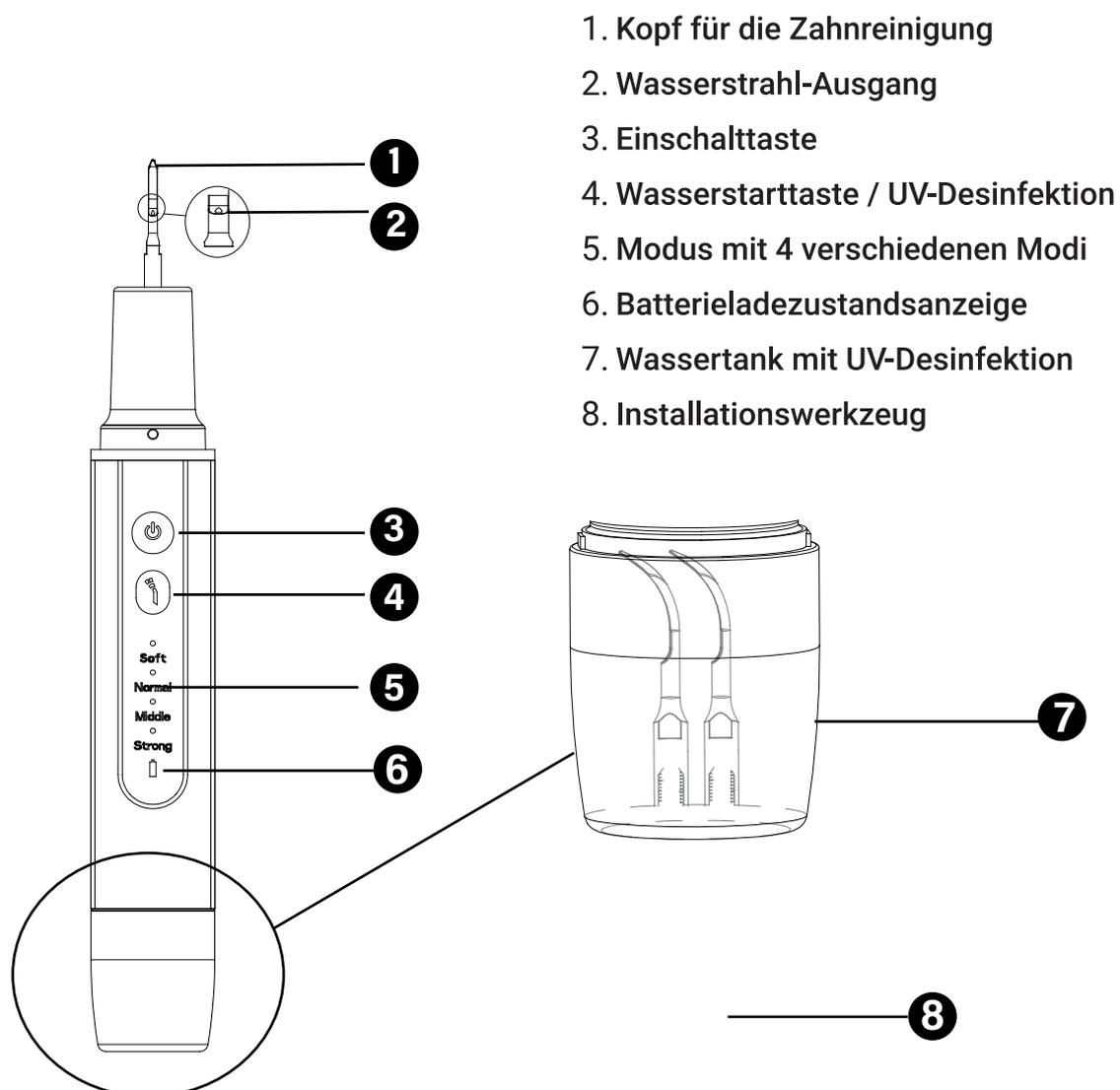


# Verwendung des Geräts

1. Vergewissern Sie sich, dass der Reiniger vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2 Stunden.
2. Wenn Sie Ihre Zahnbürste zum ersten Mal aufladen oder wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzt haben (mehr als 3 Monate), kann es länger dauern, bis sie vollständig aufgeladen ist.
3. Wählen Sie einen geeigneten Aufsatz aus und setzen Sie ihn im Uhrzeigersinn ein.
4. Ohne ihn stark zu drehen, um Schäden zu vermeiden.
5. Füllen Sie den für Wasser vorgesehenen Behälter mit Wasser. Sowohl der
6. Behälter an der Unterseite des Geräts als auch der Behälter, der die Arbeitsspitze schützt, können für die Wasserkühlfunktion verwendet werden.
7. Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten, und schalten Sie den SOFT-Modus für die sanfte Reinigung und dann den NORMAL-Modus für die normale Reinigung ein.
8. Die Startmodus-Kontrollleuchte und die LED-Leuchte am vorderen Ende des Griffs leuchten auf und zeigen an, dass die Maschine in Betrieb ist.
9. Drücken Sie die Wassermarkierungstaste, um einen starken Wasserstrahl zu starten, der die Spitze und die Zähne während der Reinigung kühlt.
10. Legen Sie das Ende der Spitze so auf den Zahn, dass die Bewegung der Spitze parallel zur Zahnoberfläche verläuft.
11. Bei schwer zu entfernendem Zahnstein kann eine höhere Leistungseinstellung im COMFORT- und STRONG-Modus erforderlich sein, um den Kontakt der Spitze mit der Zahnoberfläche während des Bürstens aufrechtzuerhalten.
12. Bewegen Sie die Spitze langsam hin und her und lassen Sie das Gerät die Arbeit machen. Verwenden Sie kurze und lange Bewegungen, um die gesamte Zahnoberfläche zu reinigen.
13. VORSICHT: Üben Sie beim Zähneputzen nicht zu viel Kraft auf eine Stelle aus und bleiben Sie nicht länger als 5 Sekunden an einer Stelle.
14. Das Gerät kann durch Fallenlassen oder unsachgemäße Handhabung an den inneren und äußeren Komponenten beschädigt werden.
15. Verwenden Sie immer ein Gerät mit Wasserkühlung, um eine Überhitzung des Reinigungskopfes zu vermeiden.
16. Verwenden Sie einen Zahnspiegel wenn Sie auf der Innenseite des Zahns arbeiten. Unterspannungserkennung. Der Alarm blinkt, wenn die Batteriespannung unter 3V liegt.
17. Wenn Sie das Gerät benutzen drücken Sie lange auf die OFF-Taste und schalten Sie es aus.
18. Das Gerät hat eine voreingestellte automatische Abschaltfunktion nach 10 Minuten, um eine Überhitzung zu vermeiden.

# Einführung in die Arbeitstipps

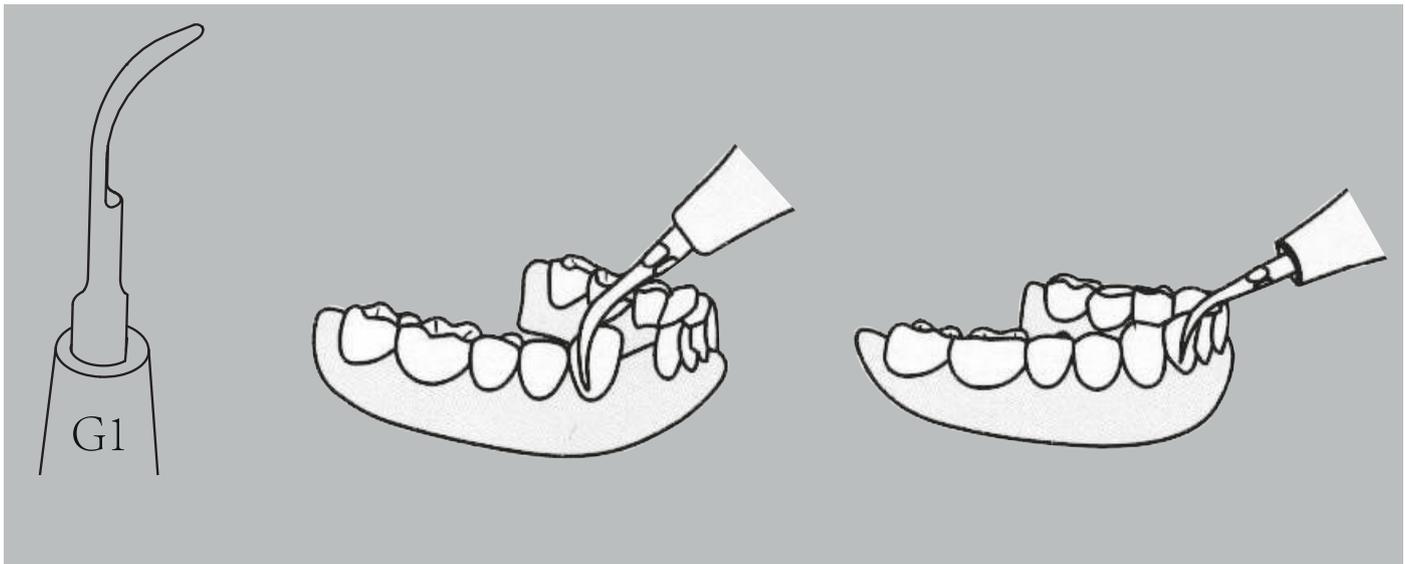

Spitze 1 ist dünn und wird zur Zahnsteinentfernung und Interdentalreinigung verwendet.

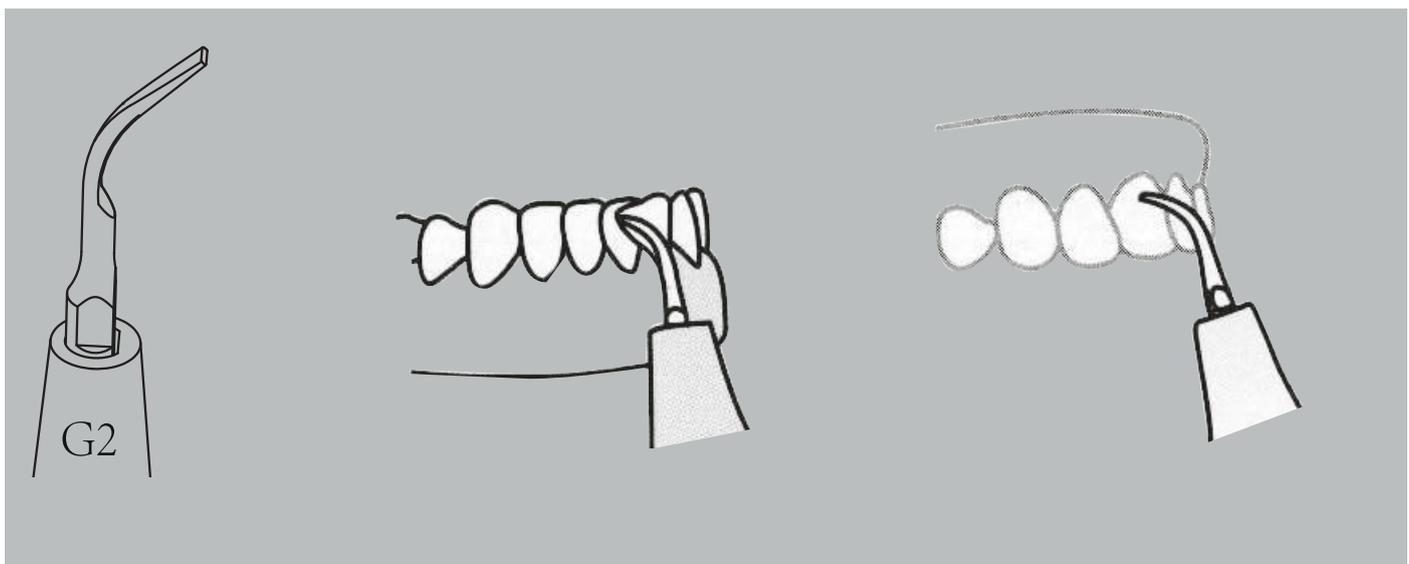


Die Spitze 2 ist breiter und wird zur Entfernung von großem Zahnstein und Pigmentierungen auf den Zähnen verwendet.



- Desinfizieren Sie die Arbeitsspitze vor dem Gebrauch mit heißem Wasser bei hoher Temperatur.
- Um Kreuzinfektionen zu vermeiden, sollten Sie die Arbeitsspitze nicht mit anderen Personen teilen.
- Die Frequenz des Instruments ist unterschiedlich, bitte wählen Sie den richtigen Arbeitsmodus.
- Bitte verwenden Sie die Arbeitsspitze korrekt wie oben beschrieben.

# Verwendung der Arbeitsspitzen


Die Arbeitsspitze berührt die Zähne sanft vertikal und bewegt sich nach oben und unten sowie nach links und rechts. Passen Sie die Dauer der Anwendung jedes Teils an den Zustand der Zähne an.

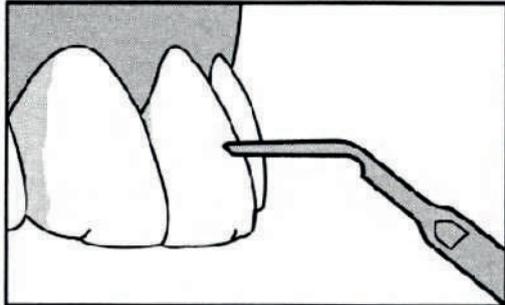


Schmutz auf der Zahnoberfläche

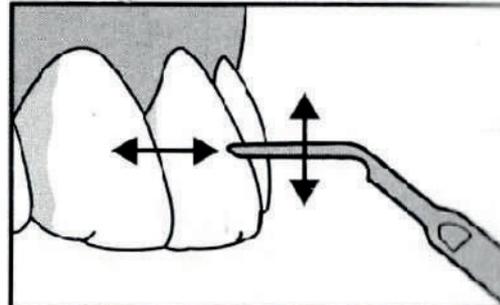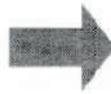


Grenze zwischen Zahnfleisch und Zahn

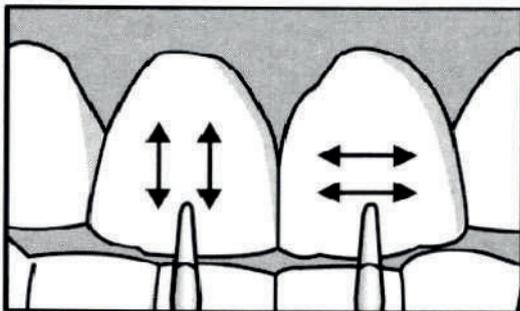


Interdentalraum

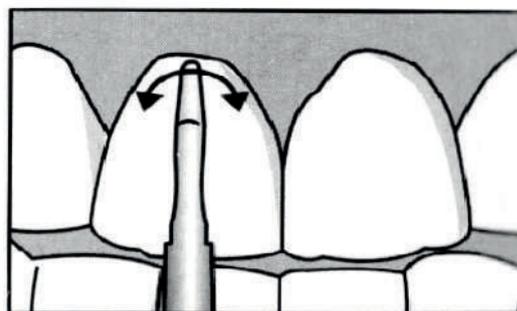



Schmutz von unebenen Zähnen

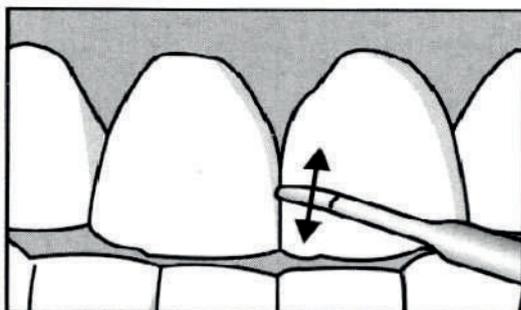

Schmutz auf der Rückseite der Zähne

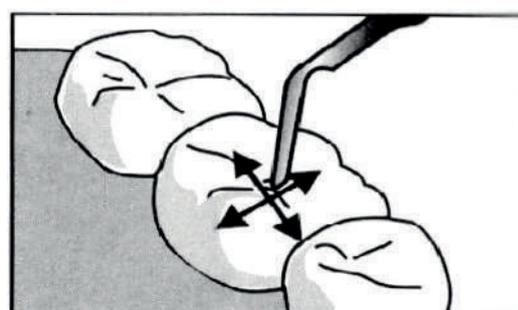


Bitte verwenden Sie bei der Behandlung der Zahnrückseite ein Dentalglas

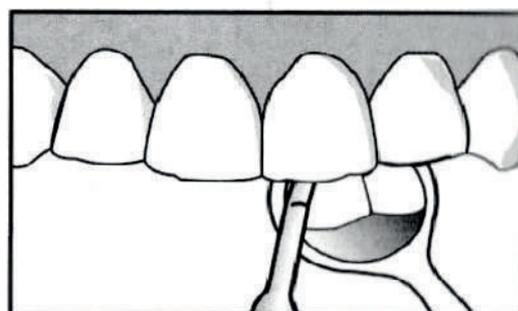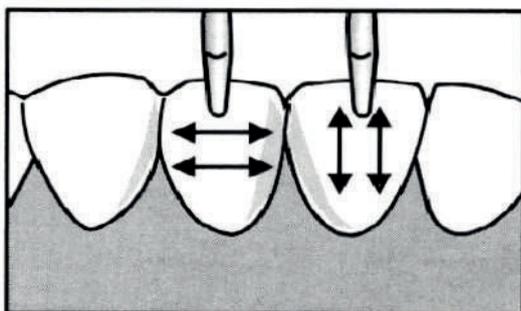


# Wechseln der Arbeitsspitze




Die Ausrichtung der Arbeitsspitze kann unterschiedlich sein, aber solange sie fest auf ihr montiert ist, kann sie in jeder Richtung verwendet werden.

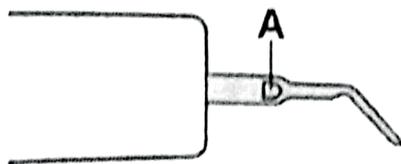


Bestätigen Sie Position A

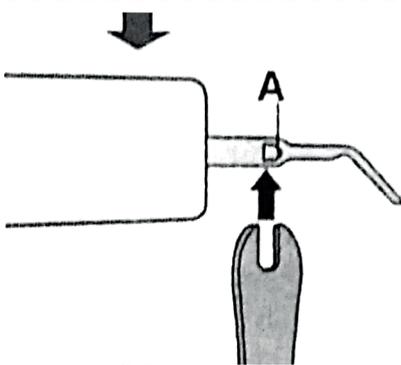

Den Schlüssel in Position A einsetzen

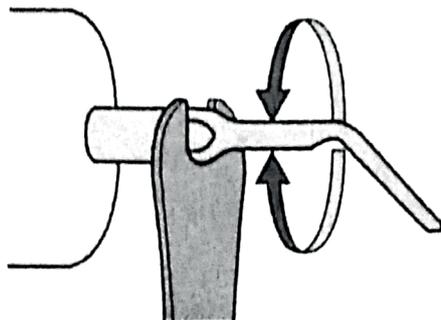

Drehen Sie den Kopf mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Arbeitsspitze zu trennen und die Demontage abzuschließen.

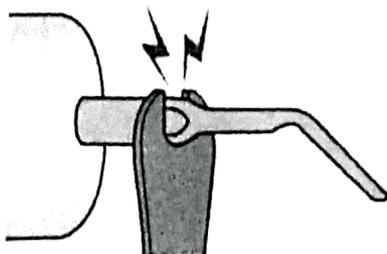


Vorbeugende Maßnahme

Vermeiden Sie eine zu feste Montage, die zu einer Beschädigung der Schnittstelle führen könnte.

# Wie zu pflegen



Bitte verwenden Sie keine Verdünnungsmittel, Benzol und Lösungsmittel, Chemikalien oder Scheuerpulver.

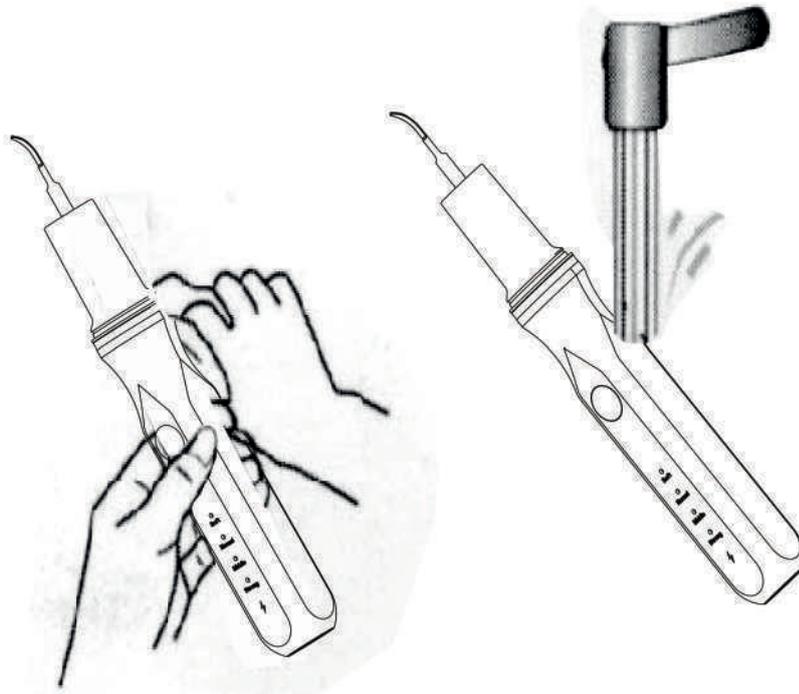

Der Hauptkörper kann direkt mit Wasser gewaschen werden, und der Schmutz auf dem Hauptkörper kann mit einem Lappen abgewischt werden.

## Hinweis

- Bitte konsultieren Sie einen zugelassenen Zahnarzt oder Dentalhygieniker, bevor Sie unsere Geräte verwenden. Wir bieten ein Produkt an, keinen Behandlungsplan, und übernehmen daher keine Verantwortung für etwaige Komplikationen. Wenn Sie sich entscheiden, das Produkt ohne professionelle Aufsicht zu verwenden, tun Sie dies auf eigene Gefahr. Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und wir Ihnen einen Ratschlag geben, nehmen Sie diesen nicht als selbstverständlich hin, da wir nicht für den Ratschlag, den wir Ihnen gegeben haben, verantwortlich sind.
- Dieses Produkt ist kein Ersatz für medizinische Geräte und hat keine therapeutische Wirkung.
- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet.